


# Relax Sitzkissen

Rollstuhlsitzkissen mit optimaler  
Druckreduktion!



## Optimale Druckreduktion durch Gel, Schaumstoff und Luft


- **Innovative Sitzlösungen**
  - **Gel in Kombination mit Schaum und Luft**
  - **Leichtgewichtig und individuell verwendbar**
- **Maximale Druckreduktion durch modernste Materialien**

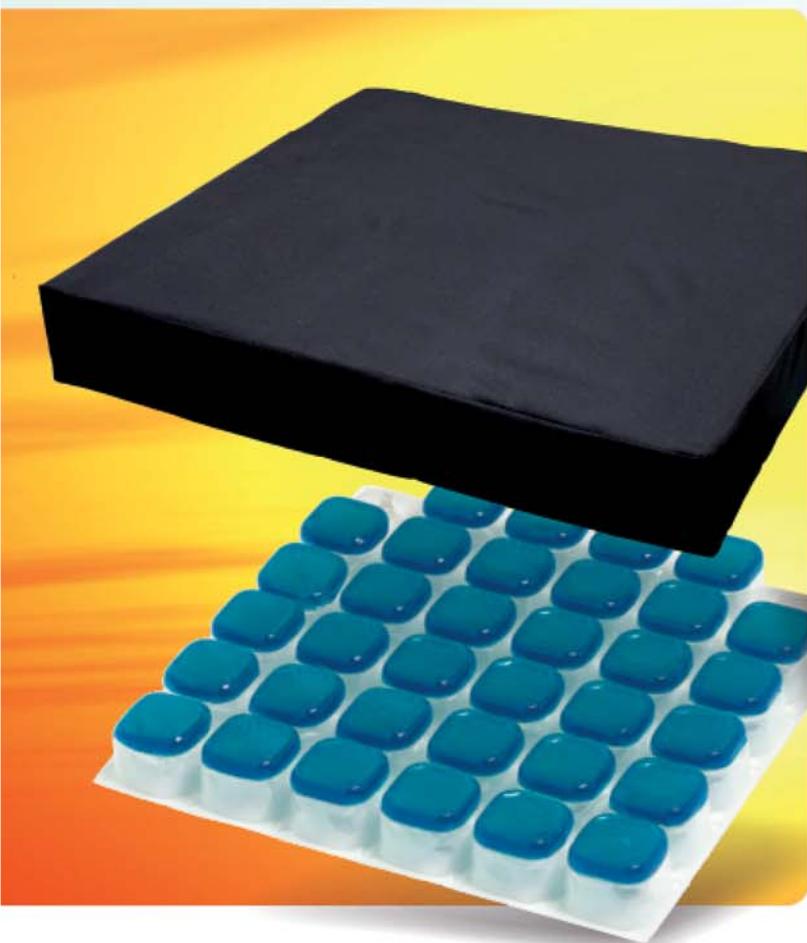

## Sitzkissen GELCELL

- Das Gelcell Sitzkissen ist eine einzigartige Kombination aus Luftkammern und Geltechnologie.
- Spezieller Einsatz für Hochrisikobenutzer.
- 34 untereinander verbundene Luftkammern, jede einzelne mit einer Gelaufgabe teilen das Gewicht optimal auf.
- Individuelle Druckeinstellung über ein eigenes Ventil sorgt für Sicherheit und effektive Druckreduktion über die gesamte Sitzfläche.
- Das Sitzkissen ist leichtgewichtig und durch die Würfelstruktur gut durchlüftet.
- Der Überzug ist bi-elastisch, atmungsaktiv und mit einer Anti-Rutsch-Unterlage ausgestattet.
- Optimale Positionierung durch Beschriftungen vorne/hinten sowie oben/unten
- Leicht zu reinigen und desinfizieren
- Geeignet bis zu einem maximalen Körpergewicht von 130 kg.
- Ersatzüberzüge lieferbar

BestellNr.	Größe	Gewicht
RG004 - 1514	38cm x 36cm x 5 cm	1,5kg
RG004 - 1616	40cm x 40cm x 5 cm	1,5kg
RG004 - 1717	43cm x 43cm x 5 cm	1,6kg
RG004 - 1816	45cm x 40cm x 5 cm	1,6kg
RG004 - 1818	45cm x 45cm x 5 cm	1,7kg

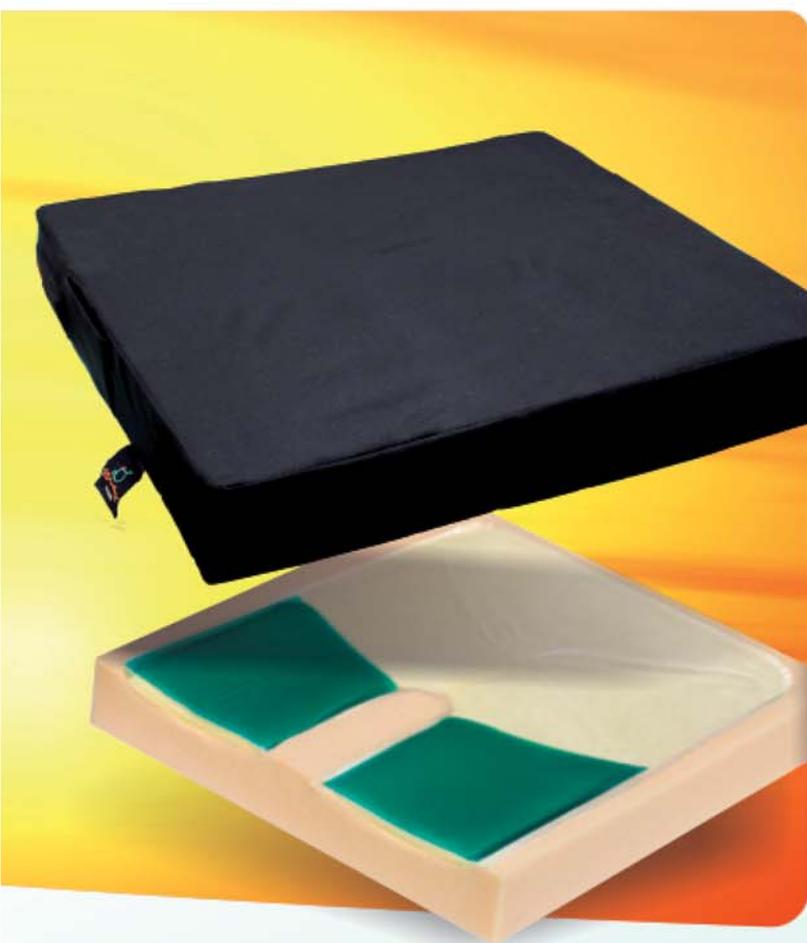

## Sitzkissen DUOGEL

- Das Duogel Sitzkissen ist für mittleres bis hohes Risiko einsetzbar.
- Die Basis besteht aus einer anatomisch geformten Schaumstoffbasis, geformt aus unterschiedlichen, viscoelastischen Schaumteilen.
- 2 verschiedene Gelkombinationen (TRUGEL im Oberschenkelbereich und FLOGEL im Sitzbeinbereich) ergänzen sich effektiv und garantieren eine exzellente Druckreduktion und Gewichtsverteilung.
- Die Schaumstoffhöhe von 7 cm ermöglichen eine effiziente Druckreduktion.
- Das Sitzkissen ist leichtgewichtig und daher auch leicht zu transportieren.
- Der Überzug ist bi-elastisch, atmungsaktiv und mit einer Anti-Rutsch-Unterlage ausgestattet.
- Optimale Positionierung durch Beschriftungen vorne/hinten sowie oben/unten
- Leicht zu reinigen und desinfizieren
- Geeignet bis zu einem maximalen Körpergewicht von 130 kg.
- Ersatzüberzüge lieferbar

BestellNr.	Größe	Gewicht
RD003 - 1616	40cm x 40cm x 8cm	1,8kg
RD003 - 1618	40cm x 45cm x 8cm	1,9kg
RD003 - 1717	43cm x 43cm x 8cm	1,9kg
RD003 - 1816	45cm x 40cm x 8cm	1,9kg
RD003 - 1818	45cm x 45cm x 8cm	2,0kg
RD003 - 1820	40cm x 50cm x 8cm	2,1kg

## Sitzkissen GELCELL G2

- Insgesamt 48 Luftwürfel, die mit einer Gel-Auflage kombiniert sind, teilen das Gewicht über das gesamte Sitzkissen auf.
- 2 unterschiedlich befüllbare Luftkammern in Zusammenarbeit mit dem Kontur-Design ermöglichen eine stabile Positionierung und eine optimale Druckverteilung.
- Gute Durchlüftung auch bei langem Sitzen durch die Würfelstruktur.
- Leichtgewichtige Ausführung durch Gel / Luftkombination
- Der Überzug ist bi-elastisch, atmungsaktiv und mit einer Anti-Rutsch-Unterlage ausgestattet.
- Optimale Positionierung durch Beschriftungen vorne/hinten sowie oben/unten
- Leicht zu reinigen und desinfizieren
- Geeignet bis zu einem maximalen Körpergewicht von 130 kg.
- Ersatzüberzüge lieferbar



BestellNr.	Größe	Gewicht
RG005 - 1616	40cm x 40cm x 4 cm	1,5kg
RG005 - 1618	40cm x 45cm x 4 cm	1,6kg
RG005 - 1717	43cm x 43cm x 4 cm	1,6kg
RG005 - 1816	45cm x 40cm x 4 cm	1,6kg
RG005 - 1818	45cm x 45cm x 4 cm	1,6kg

## Sitzkissen EASY

- Geeignet für alle Patienten mit mittlerem oder hohem Dekubitusrisiko
- Keine Ober- bzw. Unterseite, rundherum verwendbar, daher das Ideale Kissen als Grundausstattung für Pflegeheime und Spitäler
- Einfachste Handhabung, kann nicht falsch verwendet werden.
- Leichtgewichtig durch die Kombination von FloGel und Schaumstoff.
- Der Überzug ist bi-elastisch, atmungsaktiv und mit einer Anti-Rutsch-Unterlage ausgestattet.
- Leicht zu reinigen und desinfizieren
- Geeignet bis zu einem maximalen Körpergewicht von 130 kg.




BestellNr.	Größe	Gewicht
RE005 - 1616	40cm x 40cm x 5cm	1,8kg
RE005 - 1717	43cm x 43cm x 5cm	1,9kg
RE005 - 1816	45cm x 40cm x 5cm	1,9kg
RE005 - 1818	45cm x 45cm x 5cm	2,0kg
RE005 - 1820	45cm x 50cm x 5cm	2,1kg
RE005 - 2020	50cm x 50cm x 5cm	2,2kg



## Sitzkissen TRIO

- Ein leichtgewichtiges Sitzkissen für Anwender mit mittlerem Risiko
- Kombination aus FloGel (2 Bereiche) und Schaumstoff
- Anatomisch geformt
- Keine Vorder- oder Rückseite, kann beidseitig verwendet werden
- Der Überzug ist bi-elastisch, atmungsaktiv und mit einer Anti-Rutsch-Unterlage ausgestattet.
- Alternativ kann ein flüssigkeitsdichter, aber atmungsaktiver Überzug eingesetzt werden
- Leicht zu reinigen und desinfizieren
- Geeignet bis zu einem maximalen Körpergewicht von 80 kg.

BestellNr.	Größe	Gewicht
RT001 - 1616	40cm x 40cm x 4cm	1,3kg
RT001 - 1717	43cm x 43cm x 4cm	1,4kg
RT001 - 1816	45cm x 40cm x 4cm	1,5kg
RT001 - 1818	45cm x 45cm x 4cm	1,6kg

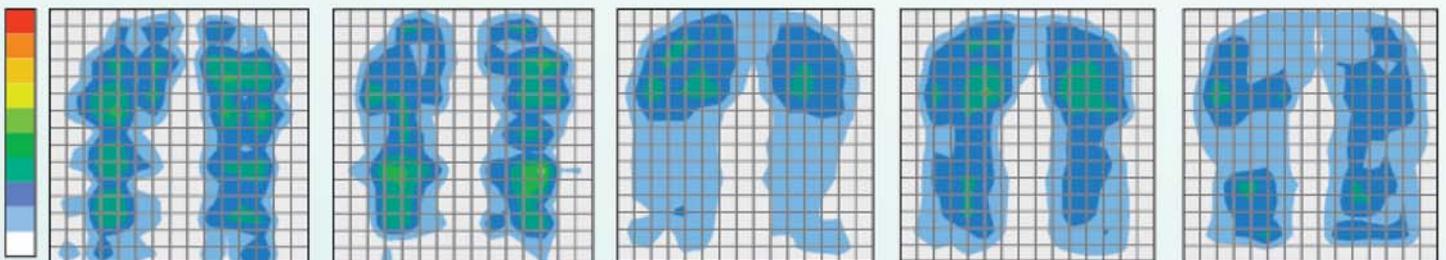

Druckdiagramm mit RELAX GELCELL

Druckdiagramm mit RELAX GELCELL G2

Druckdiagramm mit RELAX EASY

Druckdiagramm mit RELAX TRIO

Druckdiagramm mit RELAX DUOGEL